Руководство по установке

Установка программного обеспечения «СОВА-ЛАБ»

Включить компьютер, подключив его к сети питания.

Примечание: Питание должно осуществляться от сетевой розетки стандарта EURO с заземленным центральным контактом.

Скачать на компьютер установочную программу «СОВА-ЛАБ».

Войти в программу. Для установки программного обеспечения «СОВА-ЛАБ»

запустить файл Setup.exe, рис. 2.1.

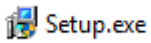


Рис. 2.1 Файл запускающий установку программы «СОВА-ЛАБ»

После запуск файла появится окно рис. 2.2. Нажать кнопку «Далее».

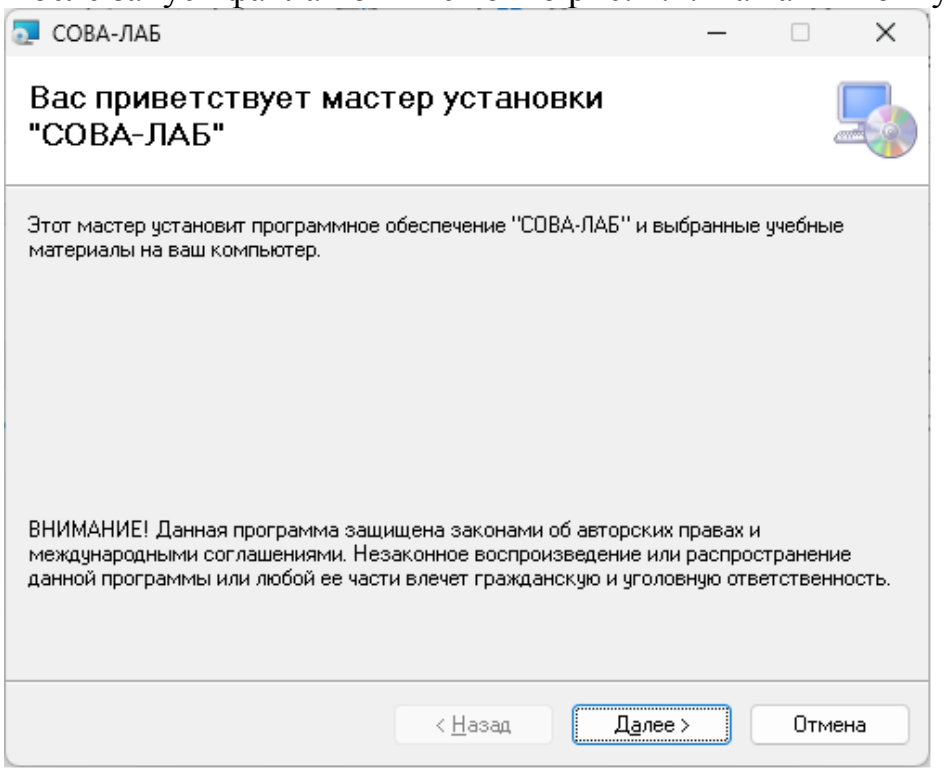


Рис.2.2 Окно установки программы «СОВА-ЛАБ»

В следующей окне необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением и принять его.

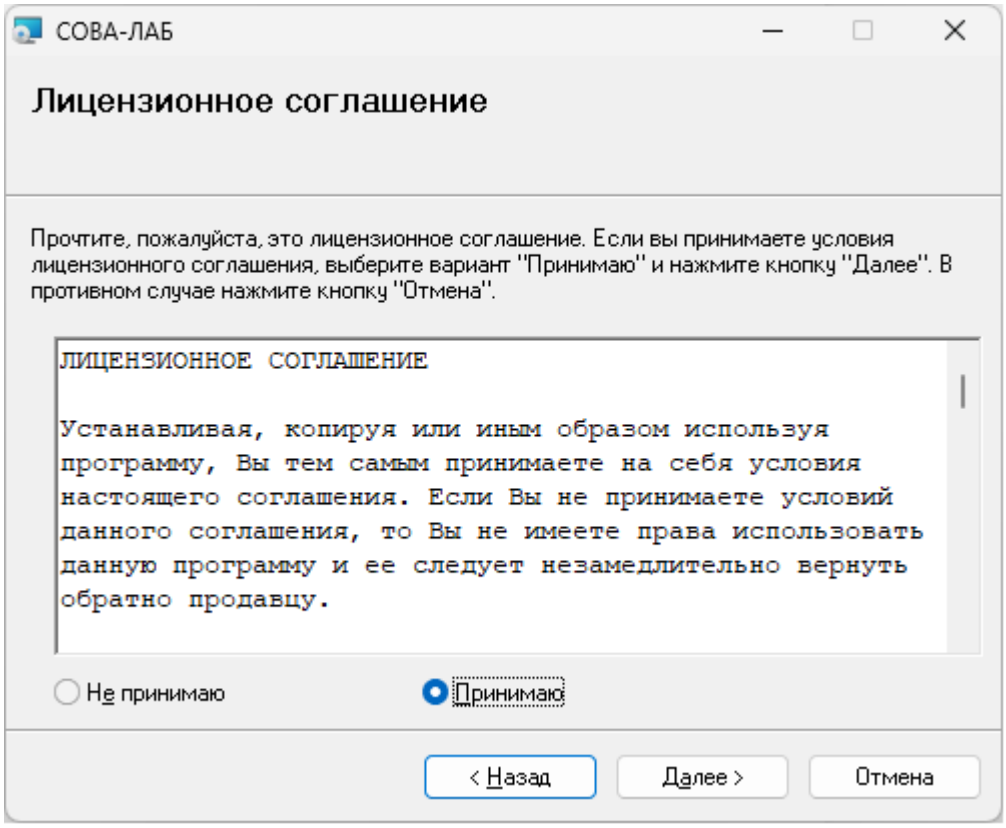


Рис.2.3 Окно лицензионного соглашения программы «СОВА-ЛАБ»

В следующем появившемся окне, рис. 2.4, можно выбрать папку для установки вручную, введя путь к ней или выбрав его по кнопке «обзор». Как только нужная папка будет выбрана, нажать кнопку «Далее».

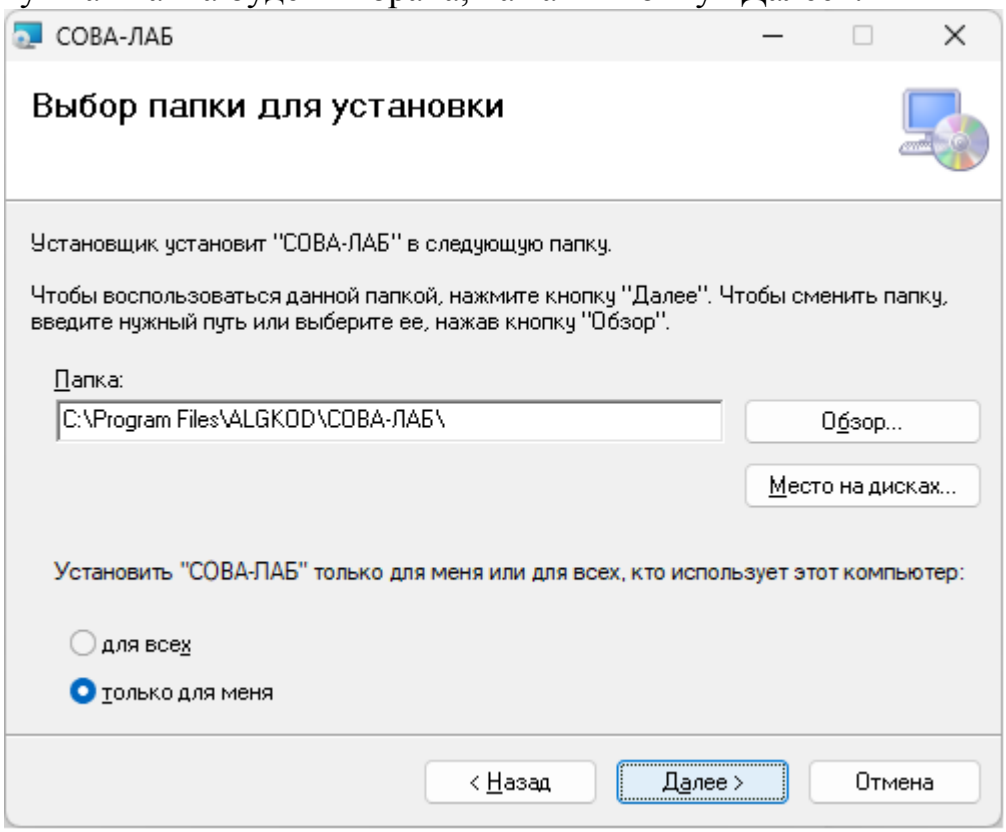


Рис.2.4 Окно выбора папки.

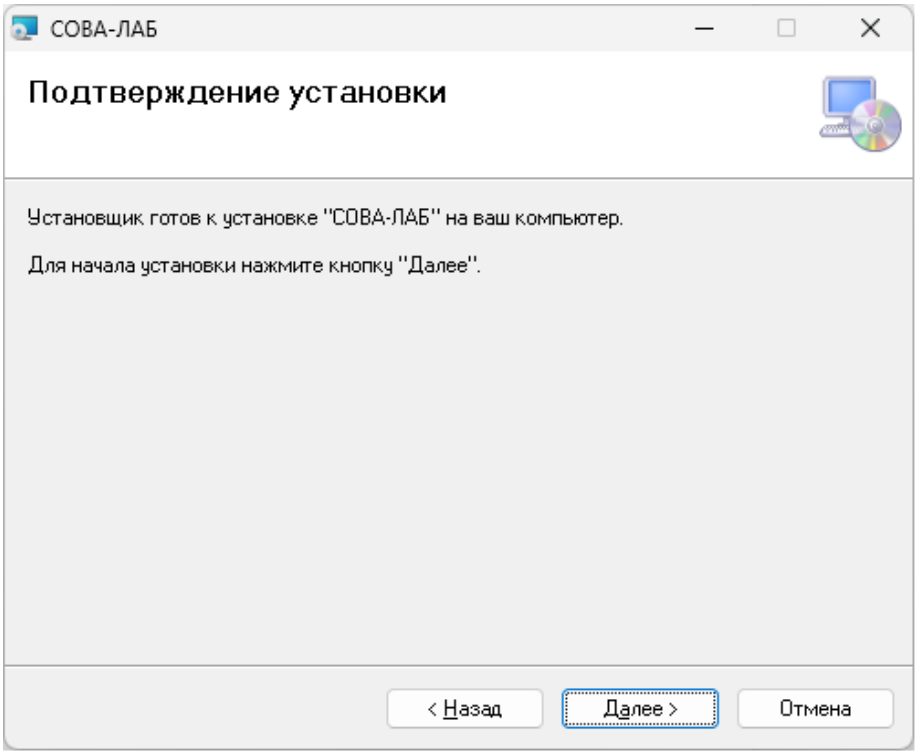


Рис. 2.5 Подтверждение установки программы

В следующем окне, рис. 2.5 заданы параметры установки. Если они не удовлетворяют, можно вернуться к прошлым пунктам и поменять их, нажав на кнопку «Назад». Для начала установки нажать кнопку «Установить».

Далее появится окно установки программы, рис. 2.6

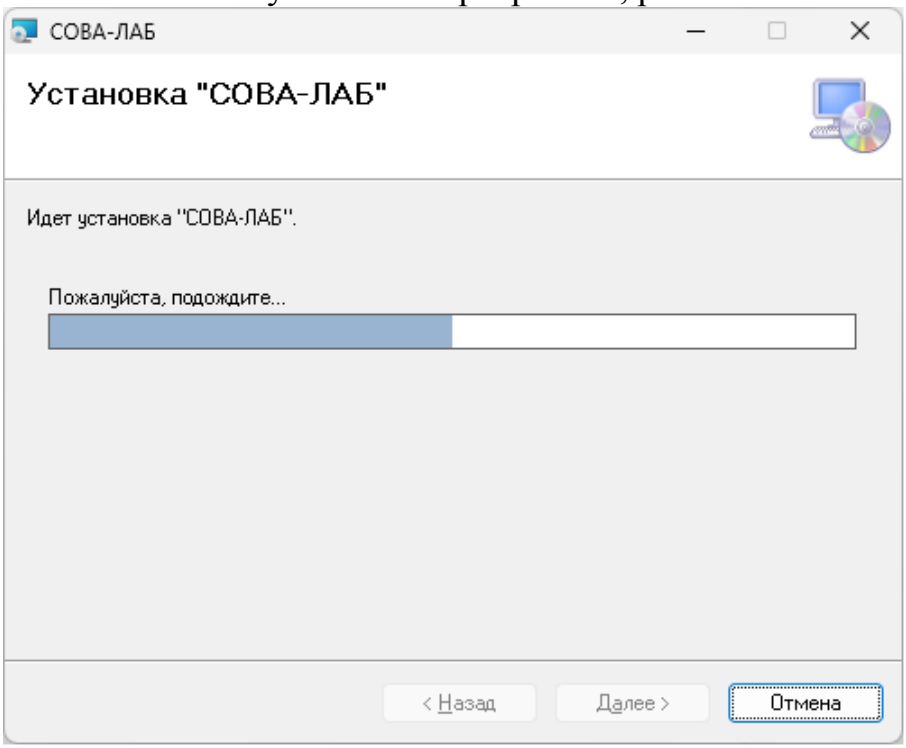


Рис. 2.6 Окно процесса установки программы «СОВА-ЛАБ»

Перед запуском установки .NET 8 появится окно. В нём на русском языке описаны выполняемые действия по шагам. Если нужный драйвер не

будет найден, то автоматически запустится его установка.

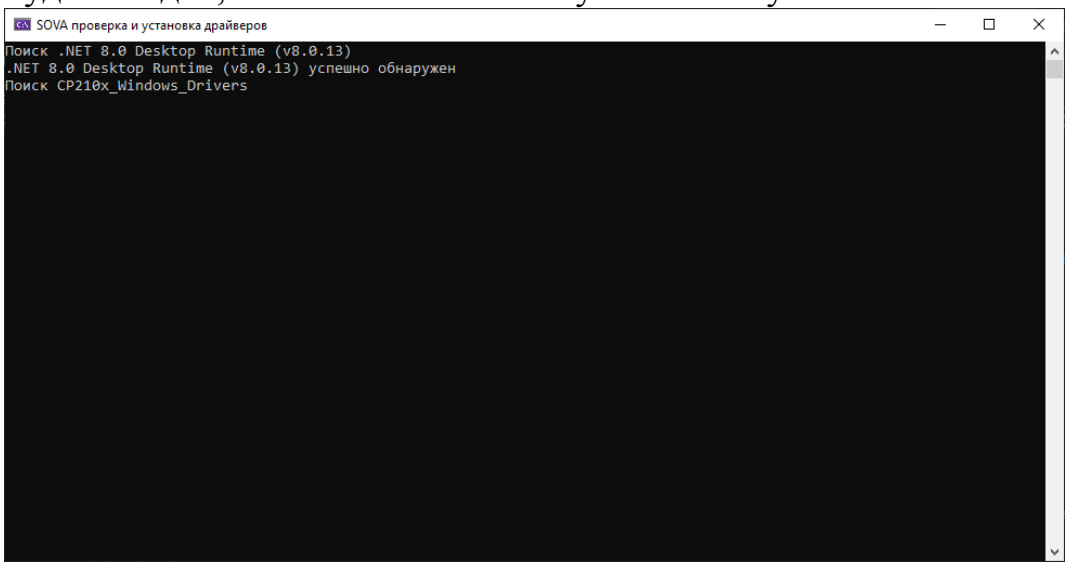


Рис. 2.7 Окно установки программы .NET 8.0

В следующем окне, рис. 2.8, появится процесс установки программы .NET 8.0.

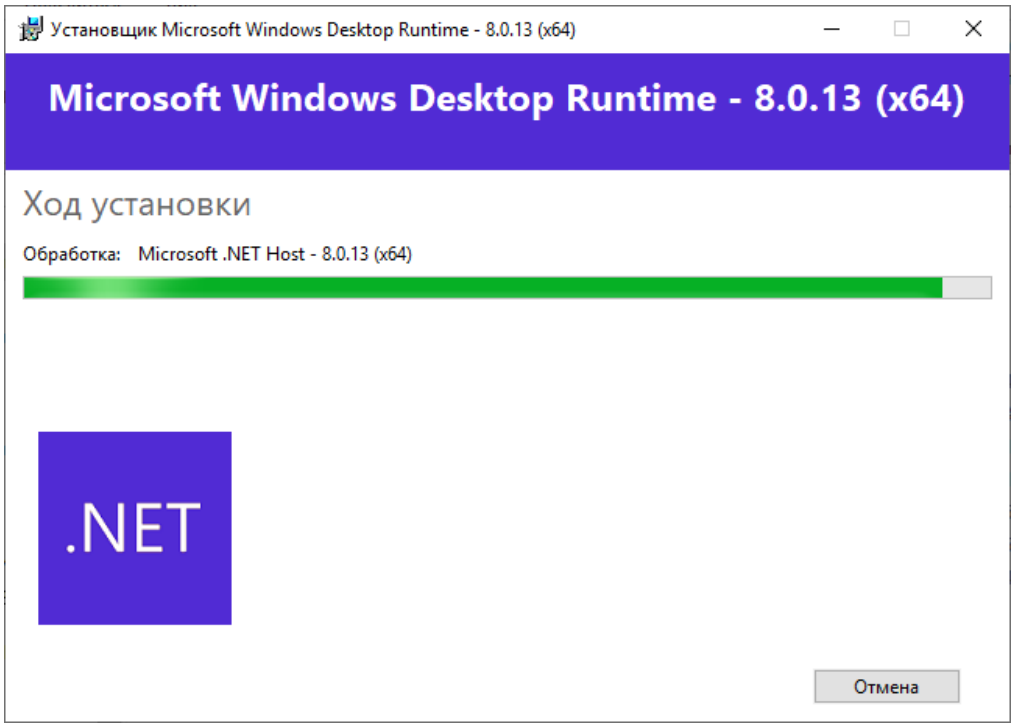


Рис. 2.8 Окно процесса установки программы .NET 8.0

По завершении установки программы появится окно, рис. 2.9, оповещающее «Установка выполнена». Закрыть это окно, нажав на кнопку «Закрыть».

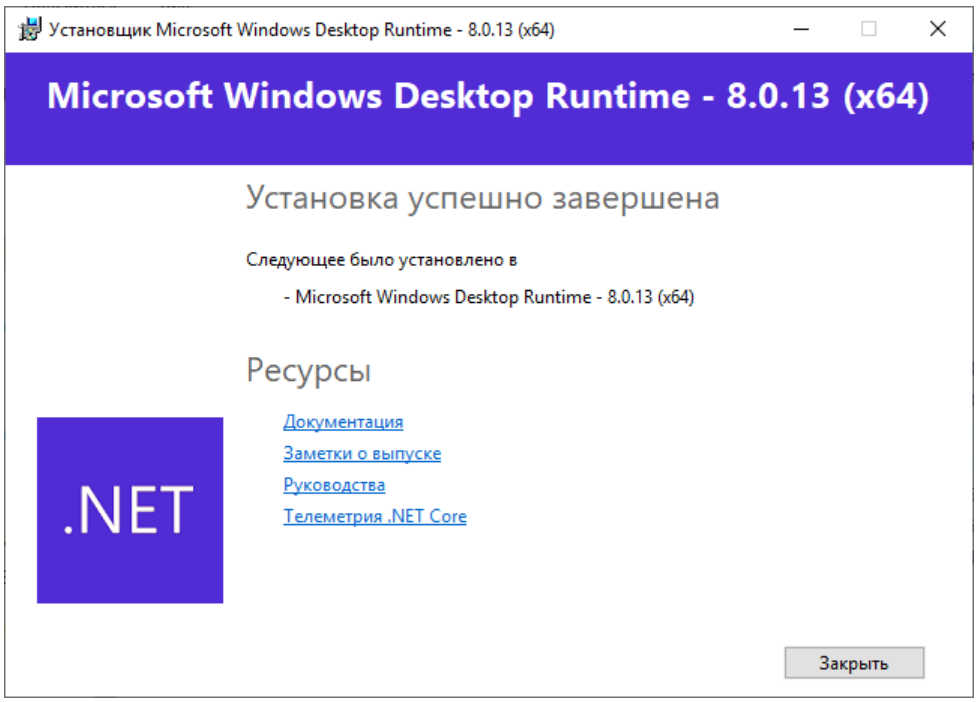


Рис. 2.9 Окно оповещающее об установке программы

Далее запустится установка драйверов для USB и корректной работы платформы, рис 2.10. Если установлен этот драйвер, можно прервать установку, нажав кнопку «Отмена». В противном случае нажать кнопку «Далее».

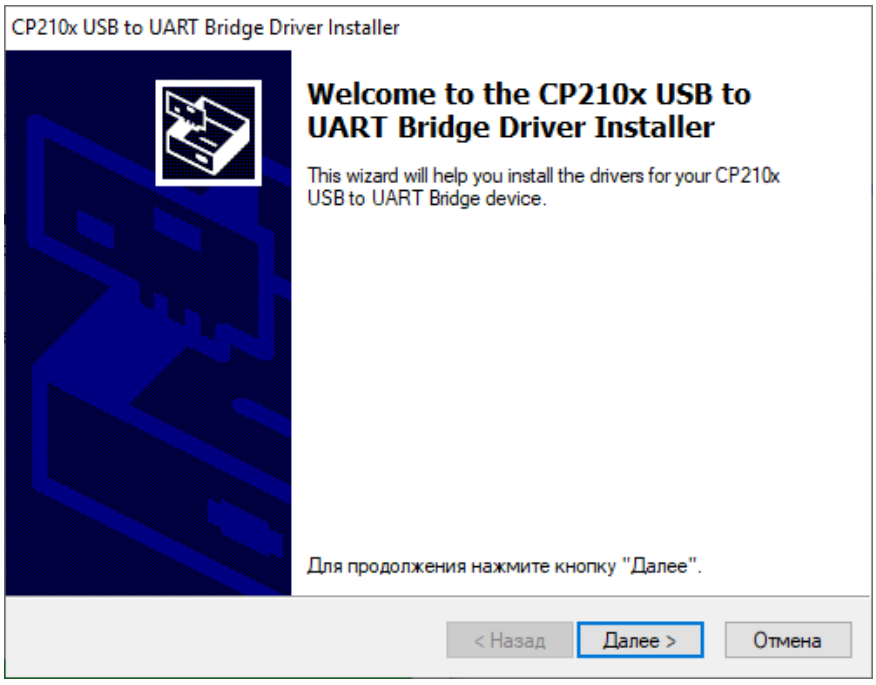


Рис. 2.10 Окно запуска драйверов

Для корректной работы программы и соглашения пользования лицензионным продуктом, выбрать пункт «Я принимаю это соглашение» и нажать кнопку «Далее», рис. 2.11.

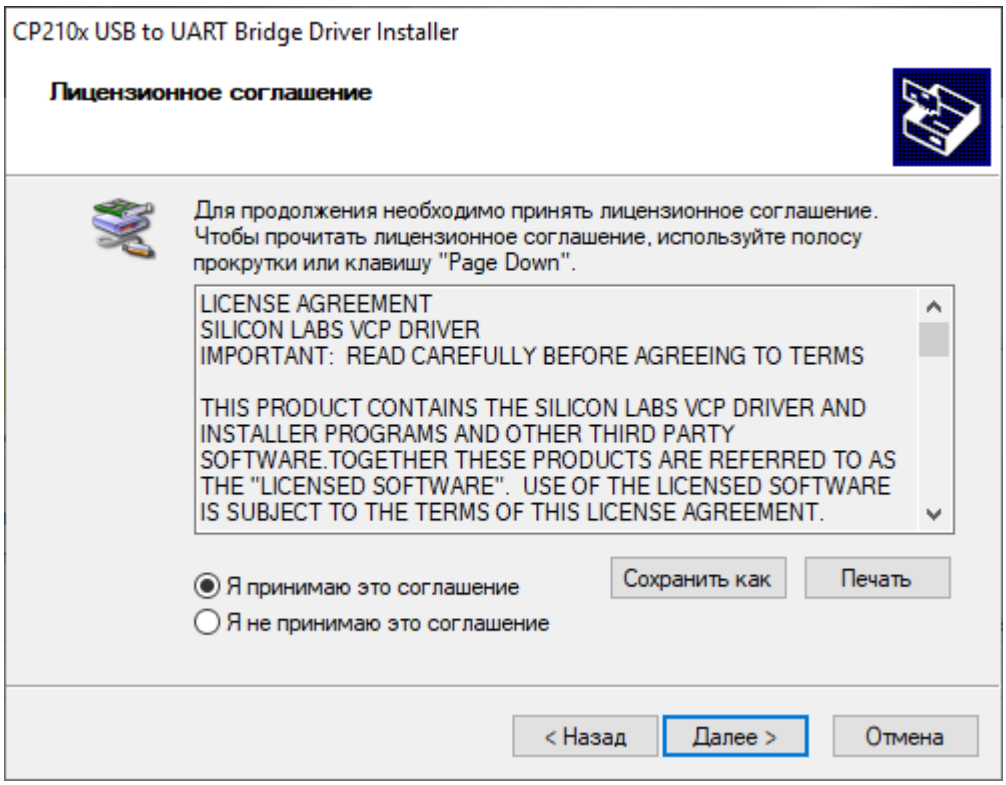


Рис. 2.11 Окно принятия лицензионного соглашения.

После установки драйверов появится окно, рис. 2.12, сообщающее об этом. Нажать кнопку «Готово».

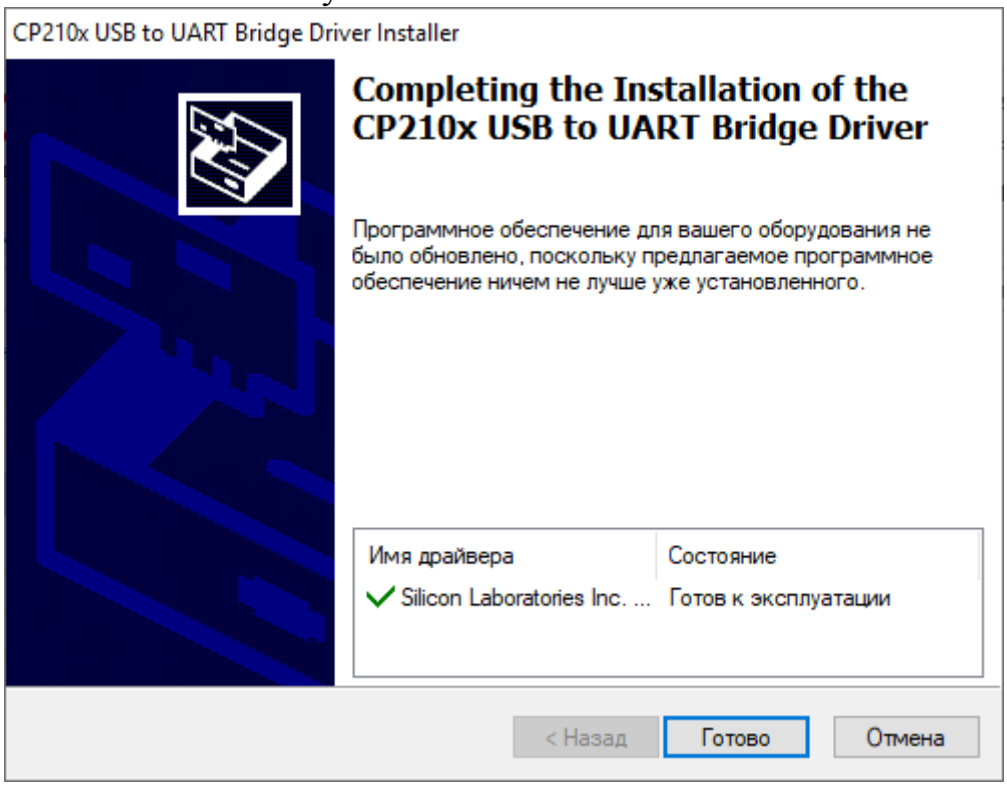


Рис. 2.12 Окно, сообщающее об установке драйверов

Появится окно, рис. 2.13 сообщающее о завершении установки программы, нажав кнопку «Готово».

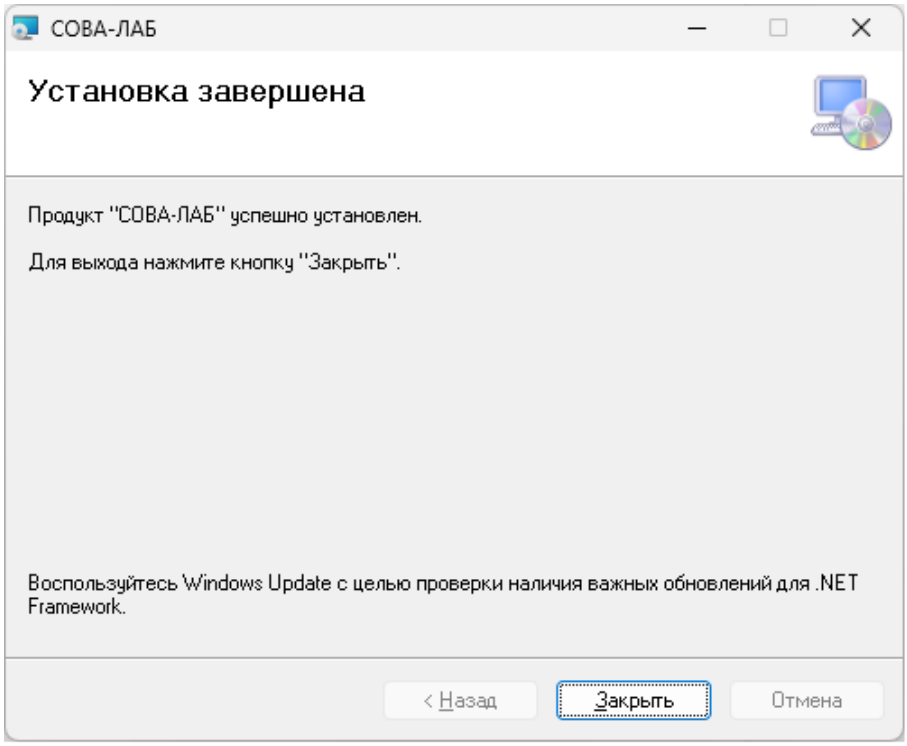


Рис. 2.13 Окно о завершении установки программы «СОВА-ЛАБ»

Программа СОВА-ЛАБ установлена.